

3M™ リットマン® ステソスコープ  
医学生向け

3M™ Littmann® Stethoscopes



Don't miss  
the Sounds  
You need to hear

3M™ リットマン® ステソスコープは、  
50年以上にわたり世界中の多くの  
医療従事者に選ばれ、  
ご愛用いただいております。  
医師を目指す皆様にお薦めしたい聴診器です。



3M™ リットマン® ステソスコープの詳しい情報は...

<http://www.littmann.jp/>

**3M**

3M™ リットマン®  
**カーディオロジーⅣ™**  
 ステスコープ  
 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Stethoscope

臨床研修/OSCE(オスキー)対応



この1器でOSCEにも臨床研修にも使用できます。

両面に大小のサスペンデッド・ダイアフラムがついた成人・小児 両用タイプ

授業・OSCE時

小児用膜面を  
 ノンチルスリーブに  
 交換して、成人用  
 ベル型・膜型として  
 使用が可能です。



ノンチルスリーブは付属品として  
 1器に1つセットされています。  
 肌にあてた時に冷たさを感じさせない  
 ノンチル素材を使用しています。

臨床研修時


両面膜型にし、成人用膜面、  
 小児用膜面として  
 使用が可能です。

膜面は、片面で低・高周波音を  
 連続聴診できるサスペンデッド・  
 ダイアフラムが両面についていますので、  
 膜面のままでも成人・小児両用として  
 ご使用いただけます。ダイアフラムとリムの  
 段差が少ない“一体成型ダイアフラム”を  
 採用していますので、お手入れも簡単に行えます。




優れた音響特性を  
 実現する  
 チェストピース

伝統的なデザインと、  
 曲線的なフォルムの  
 チェストピースをあわせ持つ  
 進化した医師向け聴診器です。

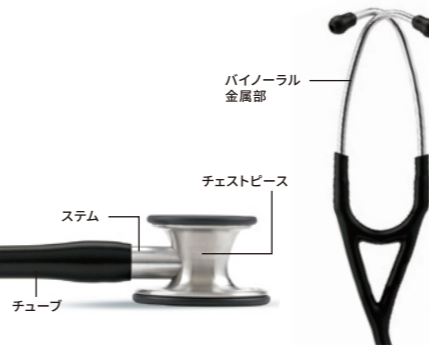

ソフトシーリング・イヤーチップ  
 柔らかく耳穴へフィットし、聴診の妨げ  
 となる周囲のノイズを遮断します。

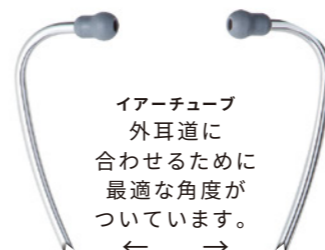

イヤーチューブ  
 外耳道に  
 合わせるために  
 最適な角度が  
 ついています。



高感度ツインワン・チューブ  
 チェストピースで捉えた生体音を効率良く  
 忠実に耳まで届ける構造です。  
 しなやかに厚みがあり、外部からの雑音を  
 遮断するので微弱な音もしっかり伝えます。



サスペンデッド・ダイアフラム  
 チェストピースを皮膚にあてたまま、  
 押さえつける力の強弱で低周波音と  
 高周波音のモード切り替えができます。

低周波音聴診時  
 軽くあてるとダイアフラムは機能せず、  
 低周波音を聴くベルタイプの働きをします。  
 高周波音聴診時  
 強く押しあてるとダイアフラムが機能して、  
 高周波音が聴診できます。

Standard スタンダード

| 製品番号 | チューブカラー           | ステムカラー | バイノーラル金属部表面仕上げ |
|------|-------------------|--------|----------------|
| 6151 | ブラック(ショートレンジス) ※1 | シルバー   | シルバー           |
| 6152 | ブラック              | シルバー   | シルバー           |
| 6154 | ネイビーブルー           | シルバー   | シルバー           |
| 6155 | ハンターグリーン          | シルバー   | シルバー           |
| 6156 | プラム               | シルバー   | シルバー           |
| 6158 | ラズベリー             | シルバー   | シルバー           |

Rainbow Edition レインボウエディション

| 製品番号 | チューブカラー | ステムカラー | バイノーラル金属部表面仕上げ |
|------|---------|--------|----------------|
| 6165 | ブラック    | ブラック   | ブラック           |
| 6205 | プラム     | パイオレット | ブラック           |

希望本体価格(税込) ¥44,550

Black Edition ブラックエディション

| 製品番号 | チューブカラー    | ステムカラー | バイノーラル金属部表面仕上げ |
|------|------------|--------|----------------|
| 6163 | ブラック ※2    | ブラック   | ブラック           |
| 6168 | ネイビーブルー ※2 | ブラック   | ブラック           |
| 6200 | ブラック ※2    | レッド    | ブラック           |
| 6201 | ブラック ※2    | ブルー    | ブラック           |
| 6203 | ブラック ※2    | パイオレット | ブラック           |

Mirror Edition ミラーエディション

| 製品番号 | チューブカラー    | ステムカラー | バイノーラル金属部表面仕上げ |
|------|------------|--------|----------------|
| 6170 | バーガンディー ※2 | ミラー    | シルバー           |
| 6177 | ブラック ※2    | ミラー    | シルバー           |

Champagne Edition シャンパンエディション

| 製品番号 | チューブカラー     | ステムカラー | バイノーラル金属部表面仕上げ |
|------|-------------|--------|----------------|
| 6179 | ブラック ※2     | スモーク   | スモーク           |
| 6176 | バーガンディー ※2  | シャンパン  | ブラック           |
| 6190 | カリビアンブルー ※2 | シャンパン  | ブラック           |

High Polish Smoke ハイポリッシュスモーク

| 製品番号 | チューブカラー    | ステムカラー | バイノーラル金属部表面仕上げ |
|------|------------|--------|----------------|
| 6202 | ネイビーブルー ※2 | ブルー    | ブラック           |
| 6204 | ブラック ※2    | シャンパン  | ブラック           |

希望本体価格(税込) ¥48,510

チェストピース:成人・小児両用型チェストピース(ステンレス)  
 ダイアフラム:サスペンデッド・ダイアフラム  
 (直径:成人用 約45mm 小児用 約35mm)  
 チューブ:高感度ツインワン・チューブ バイノーラル  
 全長/重さ:約69cm/約177g  
 約56cm/約167g(ショートレンジス)※1  
 約69cm/約180g(エディションモデル)※2

販売名:リットマン ステスコープ  
 一般医療機器 届出番号:13B1X10109000218

# 3M<sup>TM</sup> リットマン<sup>®</sup> クラシック III<sup>TM</sup> ステスコープ

3M<sup>TM</sup> Littmann<sup>®</sup> Classic III<sup>TM</sup> Stethoscope

## クラシックラインの 次世代モデル



一体成型ダイアフラム  
サスペンデッド・ダイアフラム (成人用)  
サスペンデッド・ダイアフラム (小児用)



5831

臨床研修/  
OSCE (オスキー) 対応

小児用面は付属の  
ノンチルスリーブに  
交換すればベル部  
として使用できます。

### 成人・小児2つのサスペンデッド・ダイアフラムを 搭載したクラシックラインの次世代モデル

成人用と小児用ダイアフラムを両面に搭載し、これ一器で幅広い患者様の診察が可能で一般診察用聴診器です。ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型ダイアフラム」を採用し、お手入れも簡単に行えます。

3M<sup>®</sup> リットマン<sup>®</sup> ステスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、  
在学中は新品交換、無償パーツ交換させていただきます。

| チェストピース表面仕上げ | 製品番号 | チューブカラー        | ステムカラー |
|--------------|------|----------------|--------|
| Standard     |      | バイノーラル金属部表面仕上げ | シルバー   |
|              | 5620 | ブラック           | シルバー   |
|              | 5621 | グレー            | シルバー   |
|              | 5622 | ネイビーブルー        | シルバー   |
|              | 5623 | カリビアンブルー       | シルバー   |
|              | 5627 | パーガンディー        | シルバー   |
|              | 5831 | プラム            | シルバー   |
|              | 5835 | ターコイズ          | シルバー   |

希望本体価格 (税込) ¥21,450

チェストピース: 成人・小児両用型チェストピース (ステンレス)

ダイアフラム: サスペンデッド・ダイアフラム

(直径: 成人用 約45mm 小児用 約35mm)

チューブ: シングルチューブ バイノーラル

全長/重さ: 約69cm/約150g

販売名: リットマン ステスコープ

一般医療機器 届出番号: 13B1X10109000218



●本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、実物と色調が異なる場合があります。

●3M<sup>®</sup> リットマン<sup>®</sup> ステスコープには天然ゴムラテックスを使用しておりません。●各製品には「添付文書」「取扱説明書 (日本語)」「保証書 (取扱説明書最終ページ)」が同封されております。●3M<sup>®</sup> リットマン<sup>®</sup> ステスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、在学中は新品交換、無償パーツ交換させていただきます。●本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により発売中止になることがあります。●価格は全てメーカー希望小売価格です。詳細は取扱店までお問合せください。

取扱店

3M、Cardiology IV、Classic III、Littmann、カーディオロジー IV、クラシック III、リットマンは、3M社の商標です。

2023年8月発行

**3M**

スリーエム ジャパン株式会社  
<http://www.littmann.jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2023. All Rights Reserved.  
HPM-382-Y(0823)IT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

9:00~17:00/月~金 (土日祝年末年始は除く)